



Ten20[®] ledende pasta

[DA]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

Ingredienser: Polyoxyethylen-20-cetyletter, vand, glycerin, calciumcarbonat, 1,2-propandiol, kaliumklorid, montmorillonit, natriumklorid, polyoxyethylen 20 sorbitol, methylparaben, propylparaben.

Indikationer for brug: Til brug i neuromonitoreringsprocedurer i forbindelse med ikke-gelerede neurodiagnostiske elektroder, fx: EEG-undersøgelser, evokerede potentialer, PSG og MSLT.

Anvendelse: Ten20 ledende pastas klæbende kvalitet er normalt tilstrækkelig til at klæbe elektroderne til huden og tilvejebringe ledningsevne til den neurodiagnostiske undersøgelse. Slib forsigtigt huden med et slibende produkt som fx Nuprep[®]. Brug en klokkeformet kop-elektrode med hul i midten, dyp elektroden i Ten20-beholderen, og skub pastaen ud, indtil elektrodekoppen er en smule overfyldt. Anbring elektroden på det forberedte elektrode-sted, og tryk ned med et middelhårdt tryk. Brug enten tape eller et stykke gaze til at fastgøre elektroden på stedet.



Undgå kontakt med øjnene. Hvis produktet kommer i kontakt med øjne, skal øjet skylles med varmt vand i 10 til 15 minutter. Undgå at gnide øjnene. • Kun til lokal påføring på intakt hud. Må ikke bruges på eller i nærheden af åbne sår eller kompromitteret hud. • **Vær ekstra forsigtig med patienter med hudallergi eller overfølsomhed over for kosmetik og cremer.** Hvis der opstår udslæt, rødme, kløe, hævelse eller abnormitet på huden, skal produktet straks vaskes af. • **Patienters tolerance for topiske produkter varierer meget.** Nogle patienter tåler ikke klæbemidler, slibemidler, ledende medier og salte. Reager på enhver klage, der kan signalere produktintolerance. • **Instruer patienterne i at meddele vedvarende rødme, ømhed eller hævelse på elektrodeområdet.** Hudinfektioner kan efterlade permanente ar, hvis de ikke behandles. • **Hvis elektroden skal sidde i længere tid, skal der mindst én gang dagligt kontrolleres for irritation og rødme mindst dagligt ved at fjerne elektroden og evaluere hudtilstanden under elektroden.** • **Brug ikke med strøminducerende elektroder.**

Indberet enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med enheden til producenten og, hvis produktet bruges i EU, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten har bopæl.


Sikkerhed og håndtering: Ten20 er ikke giftigt, hvis det indtages ved et uheld. Ten20 er fremstillet uden brug af naturgummilætex. Opbevar beholdere ved stuetemperatur. Undgå langvarig opbevaring under kolde temperaturer eller frysning. Beholderen er KUN BEREGNET TIL ENGANGSBRUG. Efter åbning må pastaen kun bruges på en patient og skal derefter kasseres. Ten20 kan bortskaffes uden særlig håndtering.



Medicinsk udstyr



Importør

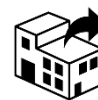

Distributør



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

