



Ten20[®] Conductive ledande pasta

[SV]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

Ingredienser: Polyoxietylen (20) cetyleter, vatten, glycerin, kalciumkarbonat, 1,2-propandiol, kaliumklorid, Montmorillonit, natriumklorid, polyoxietylen (20) sorbitol, metylparaben, propylparaben.

Indikationer: För användning vid neuromonitorering tillsammans med icke-gelatinerade neurodiagnostiska elektroder, exempelvis: EEG-undersökningar, förfaranden för framkallad respons, PSG och MSLT.


Applicering: Den adhesiva kvaliteten hos Ten20 Conductive Paste är vanligtvis tillräcklig för att fästa elektroderna på huden och ge ledningsförmåga för den neurodiagnostiska undersökningen. Skrapa först huden försiktigt med en nötande produkt, t.ex. Nuprep[®]. Använd en klockformad kopelektrod med hålet i mitten och doppa elektroden i Ten20-behållaren och skopa ut pastan tills elektrodkoppen är något överfylld. Placera elektroden på den preparerade elektrodplatsen och tryck med medelhögt tryck. Använd antingen tejp eller en bit gasbinda för att fästa elektroden.



Undvik kontakt med ögon. Om produkten hamnar i ögat, skölj med varmt vatten i 10 till 15 minuter. Undvik att gnugga ögonen. • Använd endast utvärtes på intakt hud. Använd inte på eller i närheten av öppna sår eller skadad hud. • **Var särskilt försiktig på patienter med hudallergier eller känslighet för kosmetika och lotioner.** Om utslag, rodnad, klåda, svullnad eller abnormitet uppträder på huden, tvätta av omedelbart. • **Patienters tolerans för topiska produkter varierar kraftigt.** Vissa patienter har dålig tolerans för häfta, slipmedel, ledande medier och salter. Svara på alla klagomål som kan tyda på produktintolerans. • **Instruera patienterna att meddela om det finns någon ihållande rodnad, ömhet eller svullnad vid elektrodplatsen.** Hudinfektioner kan ge permanenta ärr om de inte behandlas. • **Långvariga elektrodplatser måste kontrolleras för irritation och rodnad minst en gång om dagen genom att ta bort elektroden och utvärdera hudens tillstånd under elektroden.** • Använd inte tillsammans med ströminducerande elektroder.

Rapportera alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten till tillverkaren och, om det sker inom EU, till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Säkerhet och hantering: Ten20 är giftfritt om det sväljs av misstag. Ten20 tillverkas utan användning av naturgummilatex. Förvara behållarna vid rumstemperatur. Undvik långvarig kyla eller frysning. Behållaren är utformad för **ENBART ENGÅNGSANVÄNDNING**. När pastan har öppnats får den endast användas på en patient och sedan kasseras. Ten20 kan kasseras utan särskild hantering.

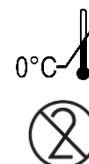

Medicinteknisk produkt



Importör



Distributör



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

