



# Ten20<sup>®</sup> Conductive Paste

[NO]

**REF** 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

**Ingredienser:** polyoksyetylen 20 cetyleter, vann, glyserin, kalsiumkarbonat, 1,2-propandiol, kaliumklorid, montmorillonitt, natriumklorid, polyoksyetylen 20 sorbitol, metylparaben, propylparaben.

**Indikasjoner for bruk:** For bruk i nevroovervåkingsprosedyrer i forbindelse med ikke-gelerte nevrodiagnostiske elektroder, for eksempel: EEG-undersøkelser, fremkalt potensial-prosedyrer, PSG og MSLT.


**Påføring:** Limkvaliteten til Ten20 Conductive Paste er vanligvis tilstrekkelig til å feste elektrodene til huden og gi ledningsevne for den nevrodiagnostiske undersøkelsen. Først, skrubber du huden forsiktig med et slipemiddel som Nuprep<sup>®</sup>. Bruk en klokkeformet kopelektrode med hullet i midten, dypp elektroden i Ten20-beholderen og øs ut pastaen til elektrodekoppen er litt overfylt. Plasser elektroden på det forberedte elektrodestedet og trykk med middels trykk. Bruk enten tape eller et stykke gasbind for å feste elektroden på plass.



**Unngå øyekontakt. Hvis produktet blir introdusert i øyet, skyl det med varmt vann i 10 til 15 minutter. Unngå å gni øynene.** • **Brukes kun lokalt på uskadd hud.** Ikke bruk på eller i nærheten av åpne sår eller kompromittert hud. • **Vær ekstra forsiktig med pasienter med hudallergi eller følsomhet overfor kosmetikk og kremer.** Hvis utslett, rødhet, kløe, hevelse eller noe unormalt forekommer på huden, må du vaske av umiddelbart. • **Pasienters toleranse for topiske produkter varierer mye.** Noen pasienter tåler dårlig lim, slipemidler, ledemedier og salter. Ta deg av klager som kan indikere produktintoleranse. • **Be pasienter om å si fra om vedvarende rødhet, ømhet eller hevelse på elektrodestedet.** Topiske infeksjoner kan etterlate permanente arr hvis de ikke behandles. • **Langtidselektrodesteder må kontrolleres for irritasjon og rødhet minst daglig ved å fjerne elektroden og vurdere hudtilstanden under elektroden.** • **Ikke bruk med strøminduserende elektroder.**

**Rapporter enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten til produsenten og, hvis den er i EU, den kompetente myndigheten i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.**

**Sikkerhet og håndtering:** Ten20 er giftfri hvis det ved et uhell inntas. Ten20 er produsert uten bruk av naturgummilateks. Oppbevar beholdere ved romtemperatur. Unngå langvarige kalde temperaturer eller frysing. Beholderen er designet for **KUN ENGANGSBRUK**. Etter åpning må pastaen bare brukes på én pasient og deretter kastes. Ten20 kan kastes uten spesiell håndtering.

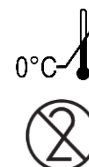

Medisinsk utstyr



Importør



Distributør



**Weaver and Company**  
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA  
+1-800-525-2130 [www.weaverandcompany.com](http://www.weaverandcompany.com)

